




1 Revise el contenido

1. Vscan con sonda
2. Estación de acoplamiento
3. Cable USB 2.0
4. Tarjeta de almacenamiento microSD (Ya instalada en Vscan)
5. Batería
6. Convertidor de CA/CC y enchufes adaptadores
7. Tarjeta de referencia rápida
8. Gel de ultrasonido
9. Estuche blando
10. CD-ROM que contiene el software Vscan gateway
11. CD-ROM que contiene el manual del usuario
12. Tarjeta microSD con software de fábrica (En un sobre cerrado)

2 Coloque la batería

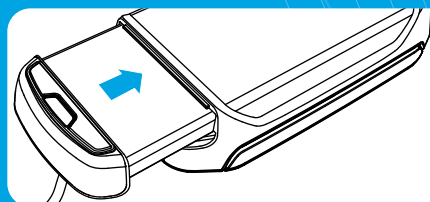

3 Cargue la batería

1. Seleccione el enchufe

RU, Hong Kong Singapur	Australia Nueva Zelanda	Corea
Norteamérica Japón	China	Europa Continental

2. Coloque


3. Enchufe

Luz indicadora: - Ámbar: batería en proceso de carga
- Verde: batería completamente cargada

Aceptar

Cargue por completo antes del primer uso.

4 Conecte

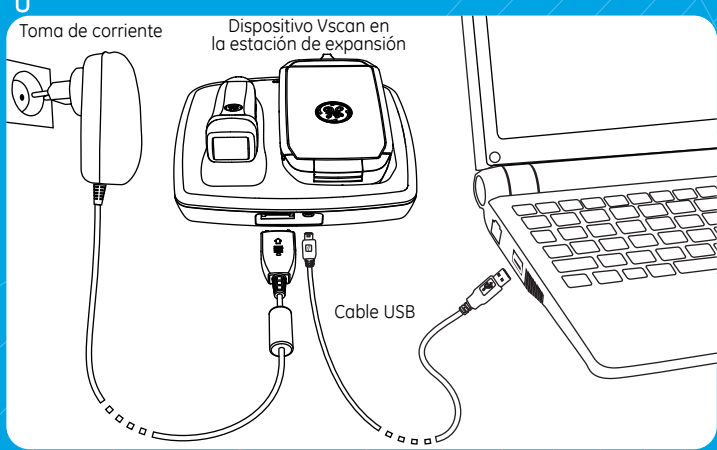

5 Active Vscan y el software Vscan gateway

El dispositivo Vscan y el software Vscan gateway se deben activar antes de usarse. Para activar el dispositivo Vscan, el usuario debe ingresar una Clave de activación. Para activar el software Vscan gateway, el usuario debe ingresar una ID del sistema.

Recupere la Clave de activación y la ID del sistema.

Paso 1

Inicie sesión en <https://vscan.gehealthcare.com> y seleccione Register (Registrarse). Siga los pasos en la pantalla para obtener la Clave de activación y la ID del sistema.

- O bien -

Llame a su representante de servicio local. (Consulte el manual del usuario incluido en el CD para obtener el número de la Línea directa).

Active Vscan.

1. Seleccione el idioma.

2. Ingrese la Clave de activación.


3. Ajuste la hora.

4. Ajuste la fecha.

5. Listo

Active el software Vscan gateway.

1. Instale el software Vscan gateway.
2. Ejecute el software Vscan gateway e ingrese la ID del sistema cuando se le indique.

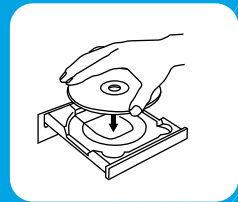

PIN: XXXX

El código PIN es necesario para obtener la ID del sistema en el portal Vscan.

Connect to Vscan Portal

Presione si aún no está conectado al portal Vscan.

System ID: []

Ingrese la ID del sistema.

Batería

Completamente cargada.

Parcialmente descargada.

Baja: prepararse para recargar.

Descargada: recargar.

Cargando

Tarjeta MicroSD

Vacía.

Parcialmente llena.

Casi llena.

Llena: cambiar o vaciar.

Sin tarjeta.

Menú

Crear examen.

Realizar medición.

Seleccionar parámetro predefinido.

Abrir Galería.

Configurar.

Vscan CE 0470

Lea y comprenda el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo Vscan.

Contraindicación: La unidad de ultrasonido Vscan no está diseñada para uso oftalmológico, ni para ningún otro uso que permita que el haz acústico pase a través del ojo.



Exploración

Iniciar

Aplicar gel

Explorar

Profundidad

Congelar / Descongelar

Almacenar

Iniciar color

Ganancia de color

Detener color

Volver a exploración B/N

Presionar y mantener

Parámetros predefinidos

Presionar Menú

Seleccionar menú de Parámetros predefinidos

Seleccionar parámetro predefinido

Anotación de voz

Comenzar la grabación

Presionar y mantener

Grabar

Detener grabación

Presionar cualquier tecla

Revisar y almacenar

Explorar

Congelar

Seleccionar cuadro

Almacenar

Reproducir (Pausa)

Almacenar

1 Cuadro fijo

Video

Medir

Presionar Menú

Seleccionar Distancia

Colocar primer punto

Colocar segundo punto

Almacenar

Galería

Presionar Menú

Seleccionar Galería

Seleccionar examen

Seleccionar archivo

Revisar otros archivos en el examen